

VIVAMAX – Otthon az egészségben!



HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

SKINMAX ULTRAHANGOS MÉLYMASSÁZS KÉSZÜLÉKHEZ

FÉNYTERÁPIÁVAL



Cikkszám: GYVUM4

Üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati és kezelési útmutatót!

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. A rendeltetésszerű, biztonságos és hatékony használat, a termék élettartamának meghosszabbítása, valamint az Ön biztonsága érdekében kérjük, tanulmányozza át alaposan (és őrizze is meg) a használati és kezelési útmutatót.

Tartalom

Bevezetés.....	2
Általános leírás	2
A csomag tartalma.....	3
Biztonsági figyelmeztetések	3
Készülék hatásmechanizmusának bemutatása	4
Az ultrahang-terápiáról	4
Különböző színű fényhullámok terápiás alkalmazása	5
Műszaki adatok.....	5
A készülék részei.....	6
A készülék használata	6
Ultrahangos mélymasszázs mód	7
Tisztító mód (Cleansing)	7
Hatóanyag bevitel mód (Import).....	7
Fényterápiás bőrmegújító mód (Rejuvenation)	8
Masszázs mód.....	8
Az újratölthető lítium-ion akkumulátor használata	8
Tárolás és tisztítás	8
Hulladékkezelés.....	9
Webes támogatás és Vivamax termékajánló	9

Bevezetés

Általános leírás

GYVUM4 SkinMax Ultrahangos mélymasszázs készülék fényterápiával a sugárzóan fiatalos és ragyogó arcbőrért!

A készülék ultrahangos mélymasszázs, fényterápiás bőrmegújító funkció és nyugtató masszázs alkalmazásával arcát üdévé és ragyogóvá varázsolja, továbbá hozzájárulhat a megereszkedett bőr feszebbé tételéhez, a ráncok mélységének csökkentéséhez és kialakulásuknak megelőzéséhez, a bőrhibák eltüntetéséhez, a pórusok összehúzásához és a kollagéntermelés serkentéséhez is. Segítségével bőrét hatékonyabban tisztíthatja, illetve a hatóanyagok intenzívebb bevitelében is komoly szerepet játszhat. Alkalmazhatja arcán és nyakán egyaránt. Méretéből és akkumulátoros kialakításából adódóan könnyedén hordozható, így otthonában, kényelmesen a kanapén ülve vagy utazás közben használhatja.

A csomag tartalma

- 1 db SkinMax Ultrahangos mélymasszázs készülék fényterápiával
- 1 db USB töltőkábel
- 1 db használati és kezelési útmutató

Biztonsági figyelmeztetések

1. Használat előtt olvassa át alaposan a használat és kezelési útmutatóban leírtakat!
2. Kizárólag rendeltetésszerűen használja a készüléket, ahogyan azt a használati és kezelési útmutatóban olvasta! A rendeltetésszerű használattól való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után.
3. Ne tisztítsa a készüléket vízzel. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. Törölje át az acél kezelőfelületet tiszta ronggyal, esetleg cseppentsen rá néhány csepp orvosi alkoholt.
4. Ne dobálja, ne ütögesse és óvja az éles tárgytól! Ne használjon a készülékhez olyan alkatrészeket, kiegészítőket, melyek nincsenek a csomagolásban!
5. Ne próbálja önmaga megszerelni, hanem kérdés vagy meghibásodás esetén forduljon a készülék forgalmazójához!
6. Tartsa távol az erős mágneses mezővel rendelkező tárgytól, közvetlen napsütéstől és maró folyadékoktól, mivel azok károsíthatják a készüléket és annak működését.
7. A készüléket és a kábelt is tartsa távol meleg (radiátor, tűzhely, kályha, erős napsütés) vagy magas páratartalmú (fürdőszoba) felületektől és helyektől, mivel az tűzveszélyes, illetve áramütéshez vezethet.
8. Tartsa a kezelő fejet állandó mozgásban, ne időzzön el egy ponton 3 másodpercnél hosszabb ideig! Ezzel megelőzhető az ultrahang túlságosan magas koncentrációjából adódó perzselő érzés.
9. Első használat előtt, vagy amennyiben a készüléket hosszú ideig nem használta, töltse fel az akkumulátort!
10. A készüléket csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy javíthatja!
11. Soha ne hagyja az áram alá helyezett készüléket felügyelet nélkül! Amikor nem használja, mindig áramtalanítsa!
12. Nem javasoljuk, hogy folyamatosan 10 percnél hosszabb ideig használja a készüléket.
13. Biztosítsa kellő körültekintéssel, hogy gyermekek ne használják a készüléket!
14. 18 év alattiak és mozgássérült személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket!
15. Ne aludjon el a készülék használata közben!
16. A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, nem minősül orvostechnikai eszköznek.



Vigyázat!

1. Ne használja tovább a készüléket, ha túlmelegedést észlel, az égési sérülések elkerülése érdekében!
2. Ha a töltőkábel sérült, vagy, ha a készülék vizes lesz vagy vízbe esik, ne helyezze áram alá és ne használja a készüléket! Forduljon a készülék forgalmazójához!
3. Ha bármilyen egészségügyi panasz van, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!

Az alábbi betegségekben, illetve tünetekben szenvedők nem használhatják a készüléket:
Rosszindulatú daganat, rákos megbetegedés, szívpanaszok és beépített szívritmus szabályzó vagy műtüdő/műsív esetén;

- 1) Vérkeringési problémák-, szív keringési zavarai-, szívkoszorúerek megbetegedései- és szívritmuszavar vagy magas vérnyomás esetén;
- 2) Bőrfertőzés vagy vérző testrész esetén;
- 3) Menstruációs ciklus, illetve terhesség idején;
- 4) Ne használja a terméket az alábbi esetekben: nyílt seben, nyálkahártyán, érzékeny (idegi) pontokon, műtési hegeken, napozás során leégett bőrfelületen, kozmetikumokra érzékeny bőrfelületen;
- 5) Betegségek esetén, mint pl. lázállapot, akut gyulladás, amikor a meleg/ hőhatás alkalmazása tilos;
- 6) Olyan betegeknél, akiknél a szemgolyó, az agy, a gerincvelő besugárzása tilos;
- 7) Tumor (rosszindulatú daganat) esetén (gyógyult állapotnál sem!);
- 8) Tuberkulózis és gyomorfekély esetén;
- 9) Állkapocs implantátum esetén az orvos véleményét ki kell kérni;
- 10) Akut ízületi reuma esetén;
- 11) Sugárterápia után;
- 12) Megváltozott bőrkép esetén (fertőzős betegségek, bőrrák, gyulladások, plasztika, bőrfeszítés);
- 13) Tobozmirigy hézag (rés) területén, nem kezelhető a beteg magasabban, mint a harmadik nyakcsigolya magassága.

Készülék hatásmechanizmusának bemutatása

Az ultrahang-terápiáról

Az ultrahangos készülék magas frekvenciájú hanghullámokat hoz létre (3MHz), amelyek a készülék membránfejének segítségével a meghatározott testfelületen fejtik ki hatásukat. Ahogy a membránfej végigsiklik a bőr felületén, a hanghullámok mélyen behatolnak a kötőszövet alsó rétegeibe, ahol hőt gerjesztenek, melynek hatására az erek kitágulnak, és a célterületre irányítják a véráramot. Az ultrahangos terápia arc- és testkezelés céljából egyaránt alkalmazható.

Kozmetikai alkalmazásnál vízbázisú bőrápoló krémet használjon a kezelt testfelületen.

Az ultrahangos mélymasszázs hatása a zsírszövetekre

Az ultrahang a zsírsejtek rezgésén keresztül segíti a sejtek mozgását, amelyet mechanikai hatásnak nevezünk. Ezen fizikai tevékenység enyhe hőhatással is jár. Mind a két hatás azt eredményezi, hogy a szervezet több zsírt éget el, továbbá erősíti a szövetek és hajszálerek anyagcseréjét is. Serkenti és szabályozza a sejtmembránok működését és növeli a bőrszövet áteresztőképességét. A hőhatásnak köszönhetően 0,5-1°C-kal nő a bőrszövetek hőmérséklete, így gyorsabban fel tudják szívni a tápanyagokat. Gyorsítja és támogatja a szövetek regenerációját, a zsírsejtek lebontását és a salakanyagok eltávolítását.

Az ultrahang hatása a szövetek természetes anyagcseréjére

A szervezetbe jutó többletenergia a bőr alatti kötőszövetekben, azaz zsírszövetekben raktározódhat és halmozódhat fel, cellulit formájában. Kialakulásához nagyban hozzájárulnak a hormonok és az enzimek, illetve a nem megfelelő szöveti anyagcsere is, amelyek a zsírszövetek kóros megnagyobbodását vagy elváltozását eredményezhetik. Az ultrahang hozzájárul a zsírszöveteket lebontásához, a zsírszövetek anyagcseréjének fokozásához, illetve a hajszálerekre- és nyiroksejtekre nehezedő nyomás csökkentéséhez, amelyek mind hozzájárulna a szövetek természetes anyagcseréjéhez.

Hatóanyag bevitel és ultrahangos tisztítás

Az ultrahang segíti a tápanyagok hatékonyabb bevitelét a bőrbe. Az ultrahang-rezgésnek köszönhetően az alkalmazott arckrém vagy egyéb kontaktanyag apró részecskékre bomlik, ezáltal könnyebben felszívódik. Az ultrahang hullámok fellazítják a bőrben lerakódott felesleges faggyút vagy más, a pórusokat eltömítő szennyeződések, így azok könnyedén eltávolíthatók, lemoshatók. A tisztító hatásnak köszönhetően a tápanyagok is gyorsabban és hatékonyabban fel tudnak szívódni.

Különböző színű fénycsugarak terápiás alkalmazása

A készülék a beépített LED lámpákon keresztül természetes fénycsugarakat juttat be a bőrbe. A fényt alkotó fotonok energiát hordoznak, melyek aktiválják a bőrben található fényérzékelő sejteket. Ezek a receptorok a felvett fényt energiává alakítják, így segíthetik a bőrsejtek regenerálódását.

Piros fény: aktivizál, élénkít, serkenti a vérkeringést. Hullámhossza: 700 nm (nanométer) (+/- 10nm). **Bármilyen bőrtípusra.** A fény hullámai 6-8 mm mélyen a dermiszbe, azaz a bőr kötőszöveti rétegébe hatolnak, fokozzák a sejtek vitalitását, a bőr rugalmasságát és a vérkeringést. Hozzájárulnak a kisebb bőrhibák eltüntetéséhez, az arcot pedig hidratáltabbá, selymesebbé varázsolják. Kiválóan alkalmazható a szem alatti sötét karikák és táskák esetében.

Kék fény: nyugtató, gyulladáscsökkentő. Hullámhossza: 475 nm (nanométer) (+/- 10nm). **Zsírosabb bőrre.** A fény hullámai 0,5 mm mélyen hatolnak a bőr felső rétegébe. Jótékony hatást fejt ki a bőrszövetekre, csökkentve a gyulladásokat és a pattanások számát, elhalványítva a hegeket.


Zöld fény: nyugtató, feszültségoldó. Hullámhossza: 550 nm (nanométer) (+/- 10nm). **Vegyes bőrtípusra, száraz és érzékeny bőrre.** Javítja a sejtek oxigénfelhasználását, serkenti a bőrfelszín mikrokeringését, ugyanakkor ellazítja és nyugtatja a bőrt. Kifejezetten ajánlott érzékenyebb bőrtípusra is.

Sárga fény: élénkít, erősít. Hullámhossza: 600 nm (nanométer) (+/- 10nm). **Zsíros és vegyes bőrtípusra.** Élénkíti a vérkeringést, aktiválja a sejteket és rugalmasabbá teszi őket. Segíti a kollagén termelést, erősíti a kollagén rostokat és a rugalmas szöveteket. Pozitív hatással van az izmokra és az immunrendszerre is. Nyugtatja az érzékeny bőrt. Hőterápia nélkül alkalmazva hatékonyan javítja a mikrokeringést, szabályozza a sejtaktivitást, fokozatosan csökkentheti a szeplők számát. Jól alkalmazható idősebb bőr esetében is, a bőrt frissebbé, fiatalosabbá és ragyogóbbá varázsolja.

Műszaki adatok


Cikkszám	GYVUM4
Készülék mérete	182*52*39 mm
Doboz mérete	200*100*68 mm
Súly	136 g
Bemeneti feszültség	DC 5V
Vibrációs frekvencia	3 MHz
Töltési áramerősség	460 mA
Akkumulátor kapacitása	800 mAh
Töltési idő (kb.)	2,5 óra
Maximális teljesítmény	5 W
Kezelési idő/alkalom	10 perc

A készülék részei

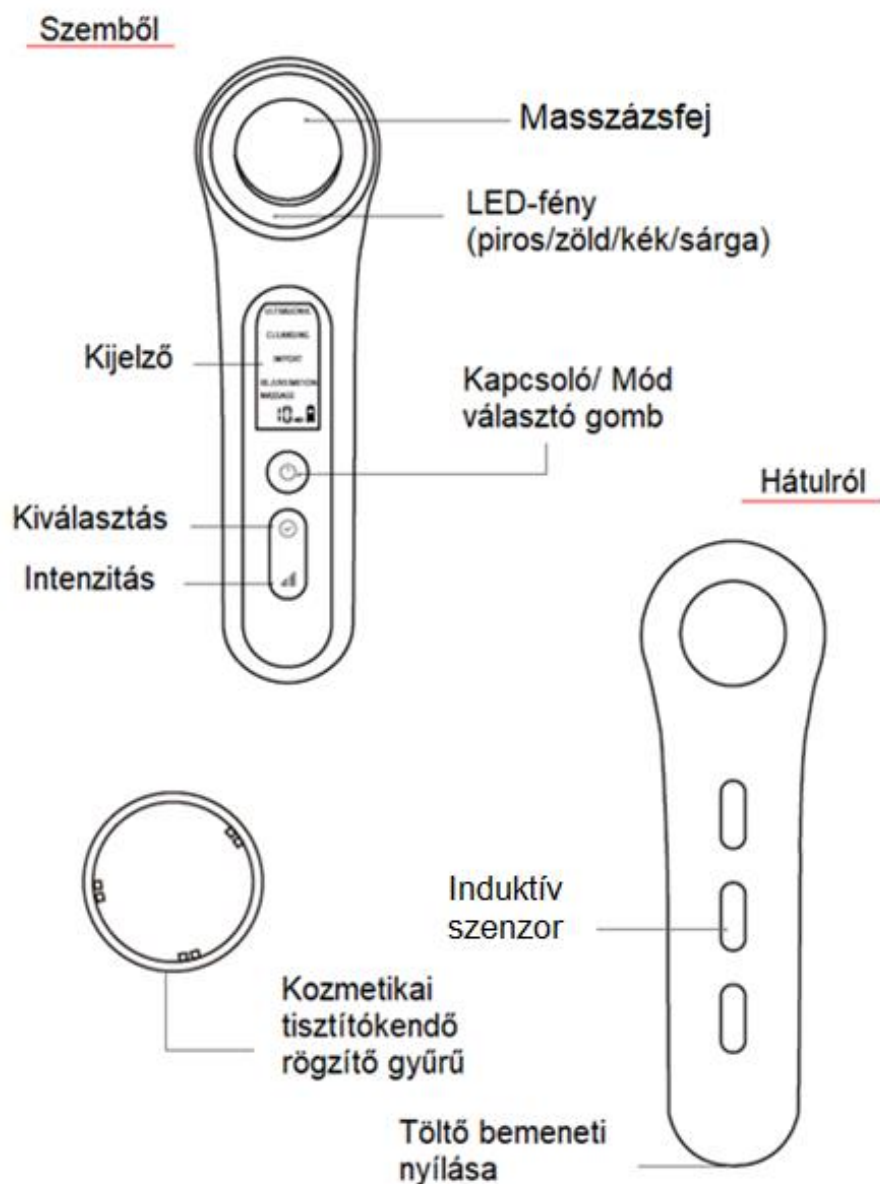

A készülék használata

1. Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozából és ellenőrizze, hogy minden tartozéka hiánytalanul megvan-e.
2. Első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort (kb. 2,5 órát vesz igénybe a töltés), majd húzza ki a csatlakozó kábelt a készülékből.
3. Minden kezelés előtt távolítsa el a szennyeződések a bőrfelszínről.
4. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **Kapcsoló/Mód választó gombot** (1-es) legalább 2 másodpercig. A kezelési módok között a kapcsoló gomb újbóli megnyomásával tud lépegetni. Amikor kijelölte a kívánt módot (villogó négyzet a mód neve körül), elsőként állítsa be az **Intenzitás gombbal** (3-as) a kívánt erősséget, majd nyomja

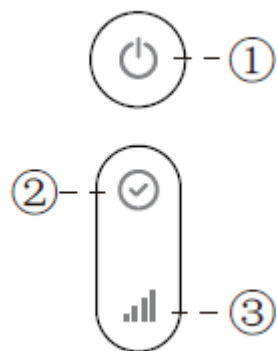

meg a **Kiválasztás gombot** (2-es). Ezután a választott kezelési mód elindul, a programból hátralévő időt pedig a készülék kijelzőjén láthatja.

5. Az Intenzitás gombbal az Ultrahangos/Tisztító (Cleansing)/ Hatóanyag bevitel (Import) módban 3 erősség közül választhat. A Fényterápiás bőrfiatalító (Rejuvenation) módban ugyanezen gomb többszöri megnyomásával választhatja ki a kívánt szint, míg a Masszázs mód esetében a masszázis elindításáért felelős.
6. A készülék indukciós alapon működik (hátdoldalon található érintő felület (Lan szenzor) és ultrahangos fej kölcsönhatása alapján).
7. A kezelési módok egyidejűleg is alkalmazhatóak, kivéve a Tisztító (Cleansing), a Hatóanyag bevitel (Import) és a Masszázs mód egyidejű alkalmazását.
8. Ha a készülék bekapcsolását követően egyik mód sem kerül kiválasztásra, a készülék 1 perc után automatikusan kikapcsol.
9. Amennyiben kezelési módot szeretnénk váltani, először állítsuk az intenzitási szintet nullára, csak utána lépünk tovább a következő kezelési módra.



Ultrahangos mélymasszázs mód

Vigye fel a kiválasztott krémet vagy szérumot az arcára és kapcsolja be a készüléket a fentiekben leírt módon. Válassza ki az ultrahangos mélymasszázs módot és állítsa be a kívánt intenzitást igényeinek megfelelően. A készülék az ultrahang segítségével a felvitt krémet/szérumot apró részecskékké bontja és segíti azok felszívódását. Az Ultrahangos mélymasszázs mód a Fényterápiás bőrfiatalító és a Tisztító vagy Hatóanyag bevitel móddal egyszerre is alkalmazható.




Tisztító mód (Cleansing)

Használjon kozmetikai törőlkendőt, amelyet a kezelés megkezdése előtt a műanyag rögzítő gyűrű segítségével erősíthet a készülékhez. A kendő rögzítése után javasoljuk, hogy ollóval vágja le a kilógó darabokat. A kendőre öntsön sminklemosót vagy micellás vizet, válassza ki a kívánt intenzitást és indítsa el a programot. A kezelőfelület rezgéseinek köszönhetően a szennyeződések és a mitesszerek a pórusok mélyéről is eltávolíthatóak. A Tisztító mód a Fényterápiás bőrfiatalító és az Ultrahangos mélymasszázs móddal egyszerre is alkalmazható.




Hatóanyag bevitel mód (Import)

Vigye fel a kiválasztott krémet vagy szérumot az arcára, kapcsolja be a készüléket és válassza ki a Hatóanyag bevitel (Import) módot és a kívánt intenzitást. A készülék ezen módban segíti a hatóanyagok hatékonyabb bőrbe juttatását és felszívódását egyaránt. A Hatóanyag bevitel mód a Fényterápiás bőrfiatalító és az Ultrahangos mélymasszázs móddal egyszerre is alkalmazható.

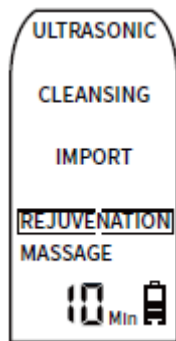

Fényterápiás bőrmegújító mód (Rejuvenation)

A Fényterápiás bőrmegújító mód bármely más móddal együtt alkalmazható. Igényeinek és bőrtípusának megfelelően válassza ki az Intenzitás gombbal a kívánt szint. 4 szín közül választhat: piros, kék, zöld és sárga.

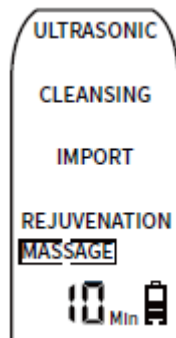

Masszázs mód

Arcára vigye fel a választott krémet vagy arcmaszkot és a készülék bekapcsolását követően válassza a nyugtató Masszázs módot, amelyet az Intenzitás gomb megnyomásával aktiválhat. A masszázs segíti az izmok ellazítását és frissíti a bőrt. A Masszázs mód a Fényterápiás bőrfiatalító és az Ultrahangos mélymasszázs móddal egyszerre is alkalmazható.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor használata

Az akkumulátorra rendeltetésszerű használat mellett 1 év jótállás érvényes. Kérjük, hogy alaposan olvassa át a használati útmutatót! A helytelenül, nem a leírtaknak megfelelően kezelt akkumulátorok a felhasználó hibájából hamarabb tönkre mehetnek, bizonyos esetekben használhatatlanná válhatnak. Az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra a garancia nem érvényes!

- Első használat előtt legalább 2,5 órán keresztül töltsse az akkumulátort a teljes töltöttség elérése érdekében.
- A készülék működési ideje teljes töltöttséggel felhasználási intenzitástól függően kb. 40 perc.
- A töltéshez csatlakoztassa az USB vezeték egyik végét a készülék alján található csatlakozóba, majd vezeték másik végét csatlakoztassa egy adapterhez.
- Az optimális, fent megadott töltési idő eléréséhez DC 5V adapter ajánlott, más esetben az akkumulátor teljes feltöltése hosszabb időt is igénybe vehet. Gyorstöltő (turbó töltő) használatát nem ajánljuk.
- A lítium-ion akkumulátor esetében nincs memória hatás, így bármikor tölthető, ezért javasoljuk, hogy amikor csak teheti, töltsse fel.

Tárolás és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, ügyeljen arra, hogy az USB töltőkábel ne legyen hozzá csatlakoztatva.

Tárolás és tisztítás

A/ Tárolás

Amikor nem használja a készüléket, tegye vissza a dobozába, tárolja száraz, hűvös helyen! Tartsa távol éles tárgyaktól, melyek kiszakíthatják a készülék borítását. Ne tekerje a kábelt a készülék köré! Ne lógassa fel a készüléket az USB kábelnél fogva! Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy legalább havonta egyszer töltsse fel az akkumulátorát annak megóvása érdekében.

B/ Tisztítás

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg, míg a motor kihűl! Kizárólag tiszta, puha, vagy maximum enyhén nedves ronggyal vagy papírtörölővel tisztítsa!

- Ne merítse folyadékba a tisztításhoz!
- A készülék főegységének tisztításához ne használjon maró hatású folyadékot, alkoholt, oldószert, benzint, kerozint, festékoldót, üveg tisztítót és erős szőrű kefé! Ezek mind tönkre tehetik a készüléket, illetve károsíthatják vagy elszínezhetik annak felületét.
- Ne próbálja ön maga megszerelni, mert ez a garancia elvesztését vonja maga után!

Hulladékkezelés

Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétbe.

Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél - függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem – annak érdekében, hogy azt továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra!



Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőkhöz!

Webes támogatás és Vivamax termékajánló

A www.vivamax.hu weboldalunkon további hasznos termékinformációkat és leírásokat talál. Oldalunkon megtekintheti térképes üzletkeresőnket, teljes egészségmegőrző választékunkat, valamint letöltheti időszakos akciós kiadványainkat.

Az Ön által vásárolt készülék mellett ajánljuk figyelmébe az alábbi termékeket is, melyeket megtalál weboldalunkon:

- Vivamax polarizált fényű lámpa
- Vivamax DeLuxe masszázssülés állítható nyakmasszázs
- Vivamax Shiatsu univerzális masszírozó
- Vivamax DeLuxe lábmasszírozó készülék légpárnákkal
- Vivamax "IntenseGun Lite" masszázspisztoly
- Herbal Freeze gél 5 féle gyógynövénnyel

Lájkolja Facebook oldalunkat, vagy iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből akciós ajánlatainkról, újdonságainkról!

 **VIVAMAX** – Otthon az egészségben!

Magyarországi importőr és forgalmazó:



Vivaldi Kft.
2120 Dunakeszi
Pallag u. 37.
Tel.: 06-1/889-9080